

Rullstolsvåg för medicinskt bruk Förenklat handhavande

MBWA-300




www.liden-weighing.se

SPECIFIKATIONER

Modell	MBWA-300
Max kapacitet	300 kg
Avläsbarhet	100 g
Noggrannhet	OIML Klass III
Taraområde	100 %
Min. belastning	2 kg

Specifikationer	
Display	25 mm hög, 5 segment, LCD-display med bakgrundsbelysning
Konstruktion	Metallkonstruktion
Produkt storlek	960 x 1000 x 1100 mm
Vägningsområde, storlek	1100 x 800 mm
Stabiliserings tid, ca	3 Sekunder standard
Arbetstemperatur	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Strömförsörjning	7,5V/1A AC adapter och Batterier 6xAA
Eu-verifierad i enlighet med 2014/31/EU	Klass III
MDD-godkänd i enlighet med 93/42/EEC	Klass I

Frontpanel

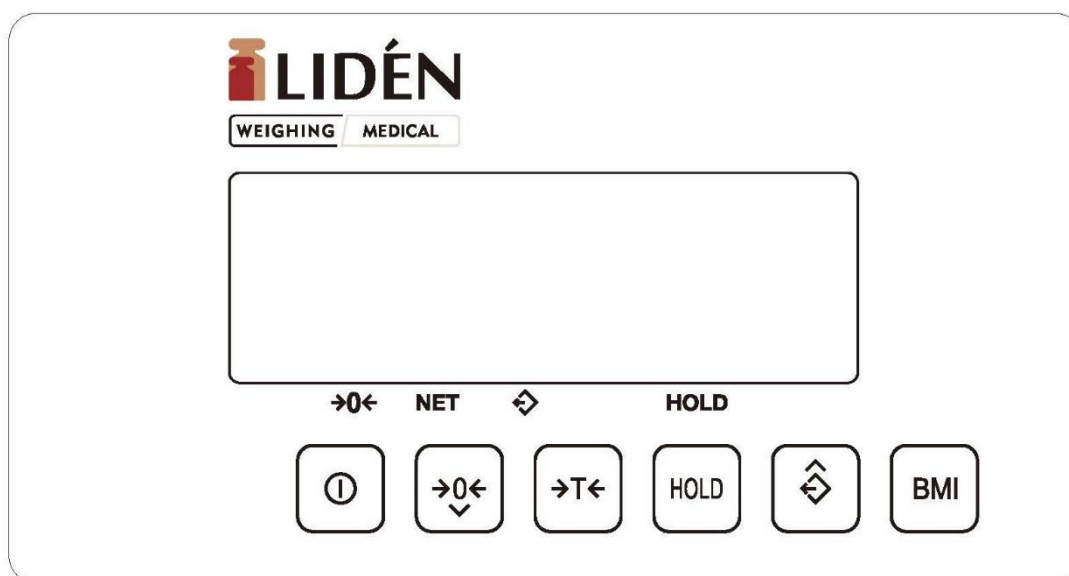

Knappar

	På / Av
	Nollställningsknapp
	Tareringsknapp
	Holdfunktion
	Återkalla
	BMI-funktion

Symboler



Nollindikering



Nettoindikering/Vågen är i tarerat läge



Återkallat värde



Låst värde



Stabilt värde

Handhavande & knappfunktioner



På / Av

Tryck kort för att sätta på och stänga av vågen.



Nollställningsknapp

Nollställer vågens display. Används vid obelastad våg.

 indikeras.



Tareringsknapp

Tareringsknappen används för att tarera sådant som vägs tillsammans med patienten, (t ex kläder, skor eller annat). Gör så här: placera en vikt (kläder, skor eller annat) på vågen. Tryck på  för att dra bort denna vikt. Displayen kommer att visa **NET**.

Ta bort (kläder, skor eller annat) och tryck på  för att gå ur tarafunktion.



Manuell eller automatisk holdfunktion

I nolläge kan man använda sig av manuell eller automatisk holdfunktion genom att trycka på  i displayen visas **Hold Auto** eller **Hold Off**.

Manuell hold: Ställ dig på vågen. Vänta på stabilt värde och tryck sedan  för att låsa värdet.

Displayen återgår till noll efter ca en sekund. Värdet hämtas upp genom att trycka på  Återkalla.





Automatisk Hold: Ställ in **Hold Auto** enligt ovan genom att trycka på . Ställ dig på vågen. Vid stabil vikt kommer vågen automatiskt låsa värdet. Om vikten efter låsning förändras mer än 4 kg aktiveras vågen igen och kommer, när vågen är stabil, återigen att automatiskt låsa värdet.

 BMI – Body Mass Index

1. Ställ en person på vågen och vänta tills vågen är stabil.
2. Tryck på  och använd sedan  eller  för att ställa in personens längd. Tryck sedan åter på  för att avsluta och visa uträknat BMI.
3. BMI-värdet försvinner när personen lämnar vågen men kan återkallas med .

Byte av batterier:

1. Koppla bort strömförsörjningen till vågen.
2. Ta bort batteriluckan på baksidan av indikatorn.
3. Sätt in 6 st. nya AA batterier och var noga med att polerna sitter rätt.
4. Stäng batteriluckan.

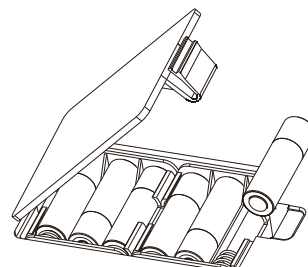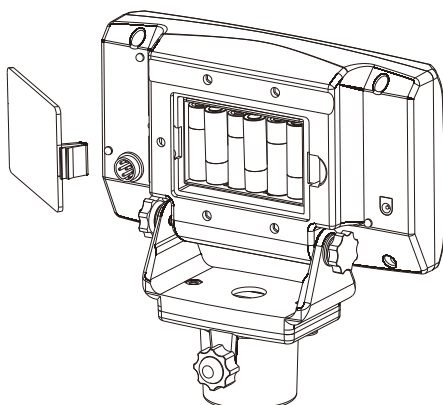

OBS! Använd **inte** uppladdningsbara batterier. Om ni gör det så ska batterierna laddas i extern laddare. Vågens adapter kan inte ladda batterierna när de sitter i vågen.